

1

CONFIGURACION CALENTADOR

ALARMAS TEMPERATURA Y OTRAS

- Sondas de la Cámara y de las Vías Aéreas**
Estos indicadores se encienden si la sonda de la cámara o la de las vías aéreas no han sido insertadas correctamente dentro del circuito respiratorio.
- Alambre del Calentador**
Se enciende si el adaptador del alambre del calentador o del circuito respiratorio no ha sido conectado correctamente o está averiado.
- Sonda de Temperatura**
Se enciende si la sonda de temperatura no está correctamente enchufada dentro del MR850 o si la sonda es defectuosa.
- Indicador de Falta de Agua**
Puede tardar 20 minutos en sonar la alarma.

MUTE

- 1 Pulsar 3 seg :
Tª Vía aérea y Tª cámara.


2 Tª cámara

3 Alarma falta agua

4 Tª Vía aérea

5 Baja Tª (<35°C VMI; < 26°C VNI)

6 Fallo sensor Tª (malposición)

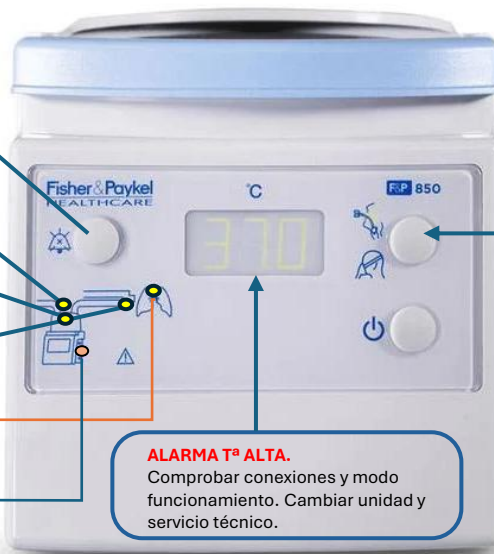

ALARMA Tª ALTA.
Comprobar conexiones y modo funcionamiento. Cambiar unidad y servicio técnico.

MODO (pulsar 2seg para cambio)

INVASIVO

37°C

NO INVASIVO


32°C

Modalidad / interfaz	Temperatura en cámara (setpoint habitual)
Ventilación invasiva (TET o TQ)	37 °C (rango aceptable 34–37 °C)
Gafas nasales de alto flujo (HFNC) a nariz	32°C (posible 37 °C si el paciente lo tolera)
Alto flujo a cánula de TQ o TET (alto flujo vía artificial)	37 °C (condicionado como ventilación invasiva)

2

CONFIGURACION ESTÁNDAR Y SEGÚN MODO

Cambio semanal recomendado

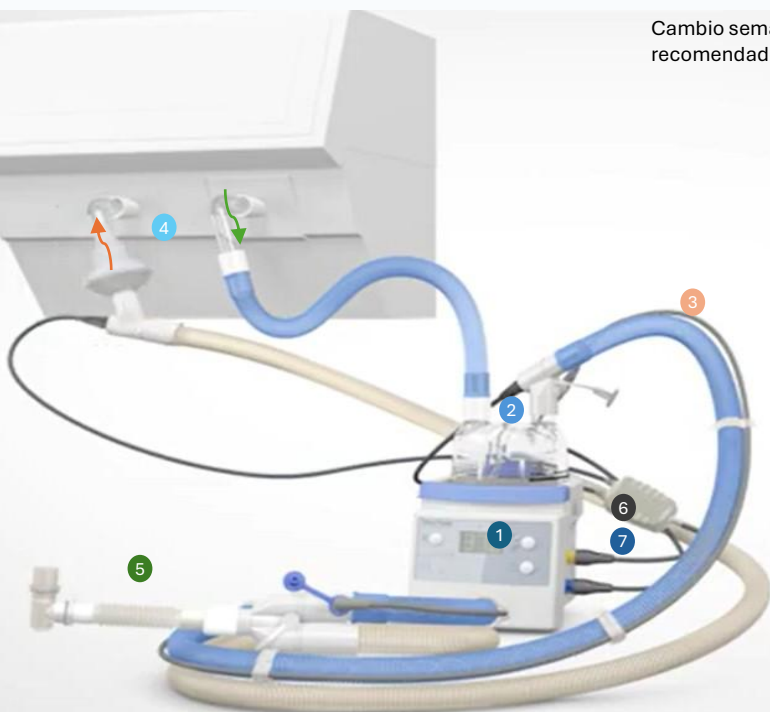

- 1 Humidificador 2 Cámara 3 Circuito respiratorio 4 Filtro esp /inp
- 5 Modo respiratorio 6 Cable calentador 7 Sensor Tª

3

FILTROS PARA SISTEMA FISHER

Filtro antibacteriano




Cambio diario recomendado




Calentador + antibacteriano

Humidificación activa, conectar directamente al TET **SIN FILTRO**

Cambiar **humidificación ACTIVA** en lugar de **filtro HME (PASIVA)** en respirador.

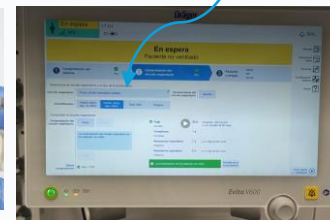

CABLE CALEFACTOR
ESPIRATORIO

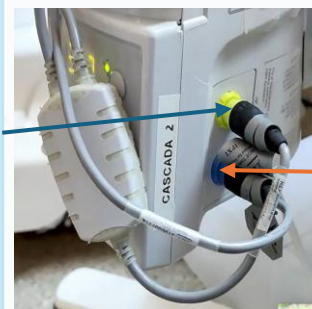


SENSOR
TEMPERATURA
Cámara y vía aérea



4

AEROSOLTERAPIA

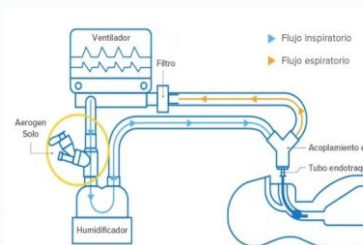

La recomendación general es utilizar sistema vibratorio tipo Aerogen.

En un circuito con humidificación activa hay que colocarlo en el **lado seco** del humidificador, es decir, en la rama inspiratoria **antes** de la cámara, no después.

Colocar el Aerogen después de la cámara (en la rama caliente hacia la cánula) aumenta la condensación y el depósito de fármaco en el circuito.

5

PROBLEMAS

CONDENSACION TUBULADURAS.

Se produce cuando hay diferencia entre la Tª **cámara** y de la **vía aérea** y el **paciente**. Puede llegar a acumularse y dar aviso de bloqueo:

- Verificar las temperaturas.
- Modo de ventilación del paciente ajustado con la Tª.
- Vaciar el agua retenida. Cambiar tubuladura.



6

ENLACES QR



Configuración rama
espiratoria.



Montaje
Humidificador



Configuración rama
espiratoria.